

H1103, H1104 Jonu sejas tvaicētājs aromterapijas procedūrām

•Produkta īpašības

>HH1104 īpašības

Jauns izskats, nerūsējošā tērauda bāze aparāta uzstādīšanai, iebūvēta ultravioleto staru lampa, pievienojams ūdens rezervuārs un hermētisks skalošanas mehānisma savienojums palīdz lielā mērā izvairīties no ūdens un tvaika noplūdi.

>H1103 īpašības:

Tam ir ne tikai tādas funkcijas kā H1104 sejas tvaicētājam, bet arī mikrodatora kontrole, iespēja regulēt auksta tvaika intensitāti līdz trešajām ātruma, automātiskā ūdens līmeņa kontrole. Šīm aparātam ir automātiskā brīdinājuma sistēma, kura brīdina par kritisko ūdens līmeni. Gadījumā ja ūdens līmenis ir ļoti zems, tas var kaitēt sildīšanas elementiem, bet ja ūdens līmenis ir pārāk augsts tas var radīt slēptas problēmas ūdens smidzinātājam. Vienlaikus brīdinājuma sistēma nepieļauj ieslēgt aparātu bez ūdens.

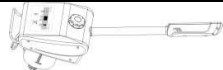

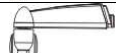
•Funkcijas:






- 1) Mīkstina atmirušās šūnas līdz nākamajai tīrīšanas procedūrai.
- 2) Atver ādas poras dziļai tīrīšanai.
- 3) Paplašina ādas poras, mīkstina uzkrātus tauku netīrumus, pinnes, kosmētikas atliekas un netīrumus, kas palīdz izdarīt nākamo tīrīšanas procedūru efektīvāku.
- 4) Palīdzība ādas porām izvadīt toksīnus.
- 5) Laicīgi izlīdzina grumbas.
- 6) Var paātrināt asins apriti, piesātina šūnas ar ūdeni, uzlabo vielmaiņu un ādas šūnu pašatjaunošanās funkcijas.
- 7) Piemērojot pareizus augus tvaika procedūru laikā, var uzlabot akne ārstēšanas efektu, kā arī ietekmi uz pinnēm, balina un baro ādu.
- 8) Ar aromterapijas palīdzību, daļēji stimulējas nervi un tiek uzlabotas fiziskas funkcijas.

•Specifikācija un tehniskie parametri:


Produkta nosaukums	Jonu sejas tvaicētājs ar mikrodatora kontroli aromterapijas procedūrām	Jonu sejas tvaicētājs aromterapijas procedūrām
Artikuls	H1103	H1104
Funkcija	Augu terapija/ aromterapija / jonu sejas tvaicētājs	Aromterapija / jonu sejas tvaicētājs
Nominālais spriegums/ jauda	AC. 110-130V/700W AC. 220-240V/850W	AC. 110-130V/700W AC. 220-240V/850W
Darba frekvence	50/60HZ	50/60HZ
Izmērs	101*39*27 CM	101*39*27 CM
Neto svars	5.5 KG	5.3 KG

•Iepakotā satura apraksts:

Vienība	Produkta apraksts	Daudzums
Aparāta bloks		1 komplekts
Balsts		1 gab.
Balsta ritentiņš		5 gab.


Balsta pamatne		1 gab.
Balsta plāksne		1 gab.
M10 skrūves		1 grupa
Uzgriežņu atslēga		1 gab.
Kokvilna ēteriskām eļļām		3 gab.
garantijas karte		1 gab.
Lietotāja instrukcija		1 komplekts

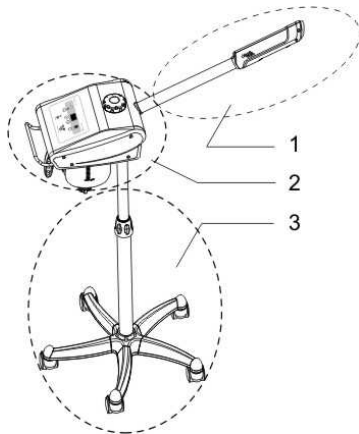● Sejas tvaicētāja struktūras apraksts




1. Smidzinātāja uzgalis
2. Aparāta bloks
3. Pamatne

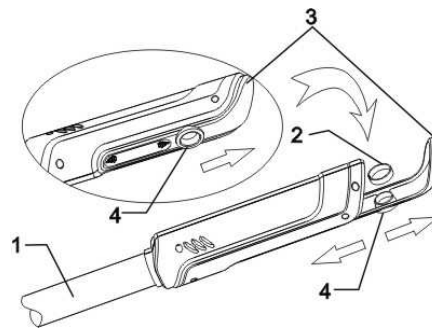● Smidzinātāja uzgalis




1. Smidzinātāja stienis
2. Kokvilna ēteriskām eļļām
3. Slīdošais vāks ēteriskām eļļām
4. Tvaika atvere

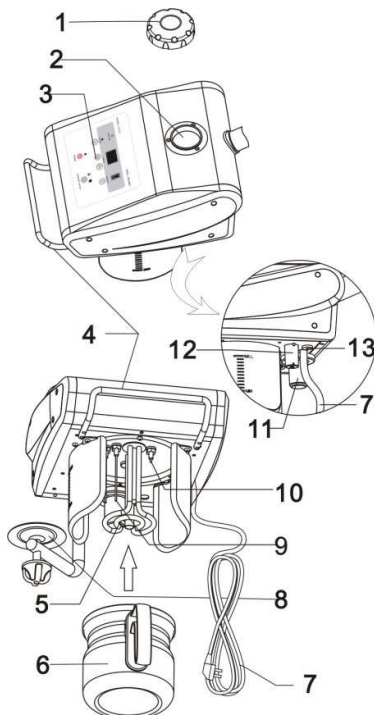● Aparāta bloka apraksts




1. Vāks
2. Smidzinātāja telpa
3. Vadības bloks
4. Rokturis
5. Sildīšanas caurule
6. Ūdens rezervuārs
7. Elektrobarošanas vads
8. Balsta uzstādīšanas caurums
9. Zema ūdens līmeņa zonde
10. Augsta ūdens līmeņa zonde
11. Aparāta bloka turētājs
12. Starteris
13. Drošinātāja ietvere

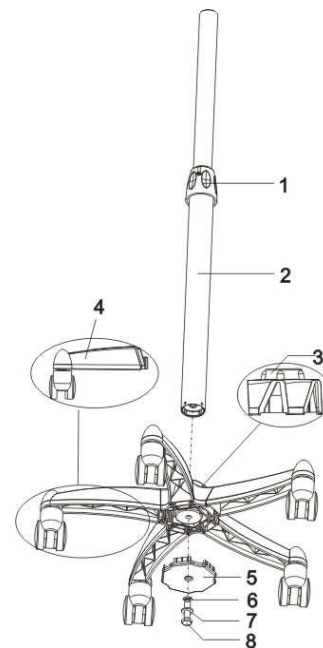● Pamatnes apraksts



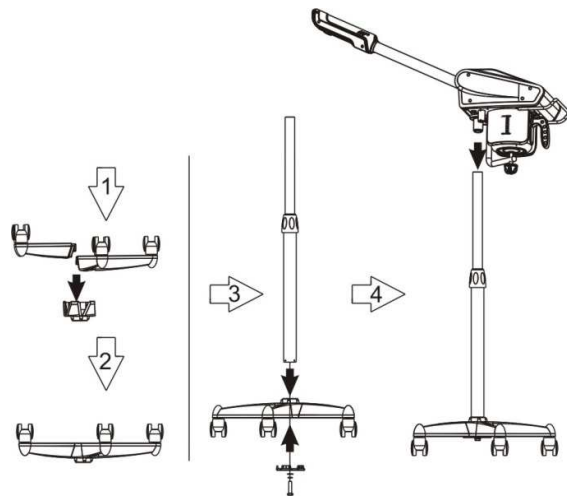1. Balsta regulēšanas skrūve
2. Stipruma caurule
3. Balsta pamatne



4. Balsta ritentiņi
5. Balsta plāksne 6.Ø10 Bļīve
- 7.Ø10 Paplāksne 8. M10 Bultskrūve

●Instrukcijas montāžai

1. solis: levietojiet balsta ritentiņus balsta pamatnē

2. un 3. solis: uzstādiat cauruli balsta pamatnē;

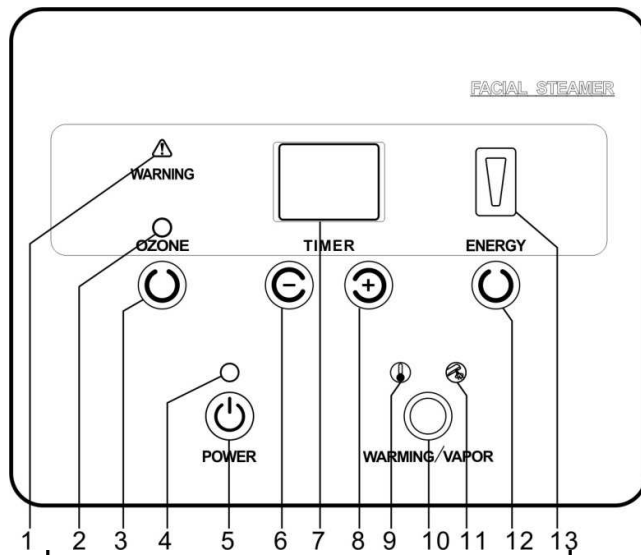
Piestipriniet balsta plāksni pie ritentiņiem;

Uzlieciet paplāksni un bļīvi uz skrūvi un nostipriniet ar šo skrūvi balsta pamatni pie balsta riteņiem.

4. solis: levietojiet aparātu uz balsta.


●Vadības bloka apraksts

>H1103 Jonu sejas tvaicētājs ar mikrodataora kontroli aromterapijas procedūrām




1. Augsta/zema ūdens līmeņa brīdinājuma indikators
2. Ozona darbības indikators
3. Ozona slēdzis
4. Ieslēgšanas indikators
5. Ieslēgšanas slēdzis
6. Laika palielināšanas poga
7. Laika displejs
8. Laika samazināšanas poga
9. Sildītāja darbības indikators
10. Sildītāja vai karsta tvaika ieslēgšanas poga
11. Karsta tvaika darbības indikators
12. Enerģijas izvēles poga
13. Enerģijas displejs
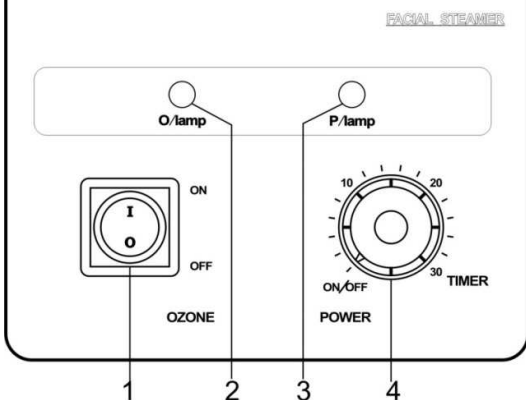
>H1104 Jonu sejas tvaicētājs aromterapijas procedūrām



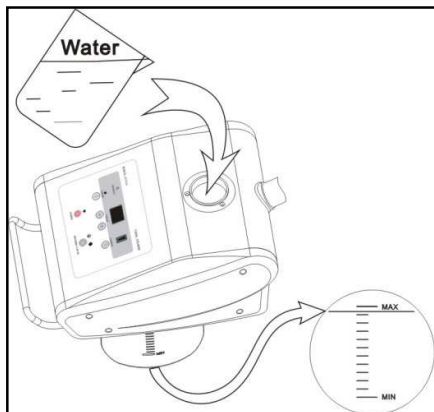1. Ozona slēdzis
2. Ozona darbības indikators
3. Karsta tvaika darbības indikators
4. Taimeris



●Lietošanas instrukcija

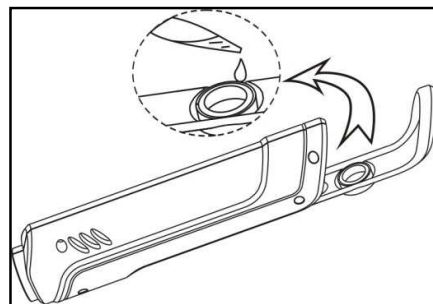
1. Ielejiet ūdeni glazē

Atveriet rezervuāra vāku un ielejiet ūdeni.

Ūdens daudzumam ir jābūt zemāk par atzīmēto maksimālo ūdens daudzumu un augstāk par minimālo atzīmēto ūdens daudzumu (sk. attēlu).


2. Ēterisko eļļu pievienošana

Ja smidzināšanas terapijai ir nepieciešama ēteriskā eļļa, atveriet ēterisko eļļu bīdāmo vāciņu uzgaļa augšējā daļā, un uzpildiet ar pipeti nedaudz ēteriskas eļļas uz kokvilnas plāksnītes (viens vai divi ēteriskās eļļas pilieni ir pietiekami). (Sk. attēlu pa labi)




3. Ūdens rezervuāra uzstādīšana un noņemšana

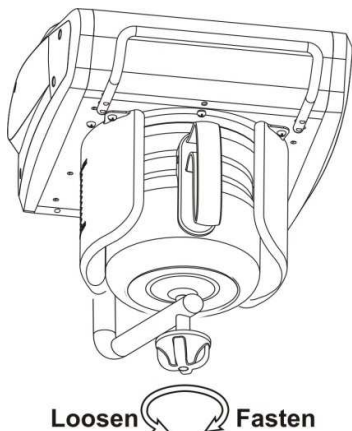- Atslēdziet barošanas vadu pirms ūdens rezervuāra noņemšanas
- Vienā rokā paņemiet rezervuāra rokturi, ar otru roku pavirziet pagriešanas kloķi (lai uzstādītu rezervuāru - pulksteņa rādītāja virzienā, bet lai noņemtu – pretēji). (Sk. attēlā)



Loosen ↻ Fasten

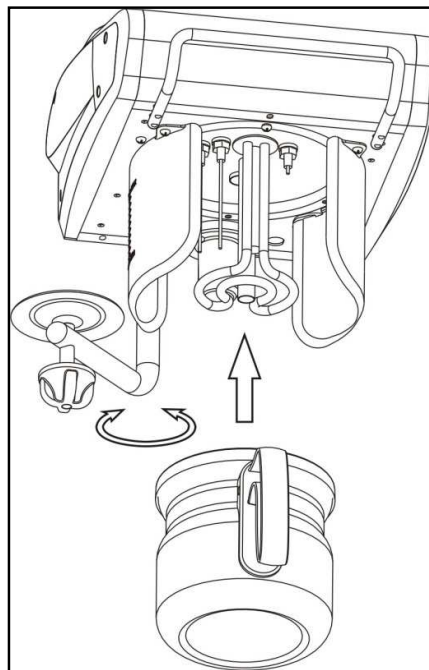

>HH1104 Jonu sejas tvaicētāja aromterapijas procedūrām kontroles paneļa lietošana:

- Ieslēdziet ieslēgšanas slēdzi.
- Pagrieziet taimeru pulksteņa rādītāja virzienā, grieziet rādītāju līdz nepieciešamai laika atzīmei.
 - Darbības laikā taimera indikators ir ieslēgts.
 - Sildīšanas caurule uzsāk darbību uzreiz pēc aparāta ieslēgšanas.
 - Pēc apmēram sešām minūtēm sāk smidzināt tvaiks. Ieslēdziet ozona funkciju šajā laikā, ja ir nepieciešams.
- Ieslēdziet ozona funkciju.
 - Ieslēdziet "OZONE" slēdzi
 - "OZONE" darbības indikators ieslēgsies
 - Ozona caurule sāk strādāt uzreiz kad jūs ieslēdzat slēdzi.
 - Acīmredzot ozons smaržo tvaikā pateicoties atomizācijas fenomenam.

4. Tvaiks smidzinās nepārtraukti aparāta darbības laikā, tāpēc ūdens daudzums visu laiku kritīs. Taimeris jāpagriež "OFF" pozīcijā, kad ūdens daudzums pazemināsies līdz minimālas atzīmes, tad izslēdziet barošanu. Pēc apmēram 1 minūtes atskrūvējiet rezervuāra vāku un ielejiet ūdeni, lai turpinātu procedūru (ūdens daudzumam nedrīkst pārsniegt MAX atzīmi).

>H1103 Jonu sejas tvaicētāja ar mikroatora kontroli aromterapijas procedūrām kontroles paneļa lietošana:

1. Ieslēdziet ieslēgšanas slēdzi.

2. Iedegsies ieslēgšanas indikators "○" virs ieslēgšanas pogas "⏻" uzspiežot vēlreiz ieslēgšanas pogu "⏻", motors pārslēdzas gaidīšanas stāvoklī.

—Laika displejs parādīs "15" minūtes.

— zīme "📏" uz displeja norāda, ka aparāts strādā uz maksimumu.

—Ozona indikators "○" iedegsies, kad ozona funkcija ir ieslēgta, un izslēdzas "●" kad ozona funkcija ir atslēgta.

— Pulverizatora darbības indikators "🌀" vai "🌡️" būs ieslēgts, bet "WARMING/VAPOR" (sildītāja/ karsta tvaika) slēdzis "○" būs atslēgts.

3. Karsta tvaika vai sildītāja ieslēgšana ar "WARMING/VAPOR (sildītāja/ karsta tvaika) ○" pogu

— Ieslēdziet karsta tvaika ieslēgšanas "WARMING/VAPOR (sildītāja/ karsta tvaika) ○" pogu, pulverizatora darbības indikators "🌀" iedegsies, un iedegsies spuldzīte "○". Šajā laikā, aparāts sāks uzsildīties, un tvaiks sāks pūst pēc apmēram 6 minūtēm.

— Ieslēdziet karsta tvaika ieslēgšanas "WARMING/VAPOR (sildītāja/ karsta tvaika) ○" pogu, iedegsies sildītāja darbības indikators "🌡️" un iedegsies spuldzīte "○". Šajā laikā aparāts sāks uzsildīties.

4. Laika iestatījumi

— Pulverizatora darbības laikā, iestatījumi ir sekojoši: nospiediet pogu "⊖" un "⊕" zem uzraksta "TIMER", lai uzstādītu nepieciešamu laiku. Laika diapazons: 1 -30 minūtes.

— Uzsildīšanas laikā, iestatījumi ir sekojoši: nospiediet pogu "⊖" un "⊕" zem uzraksta "TIMER", lai uzstādītu nepieciešamu laiku. Laika diapazons: 5-90 minūtes.



5. Enerģijas iestatījumi


Nospiediet "ENERGY ○". Jūs varat izvēlēties starp stipras, vidējas vai vājas tvaika intensitātes. Kad displejā parādās "📏", tas nozīmē, ka aparāts strādā ar maksimālo intensitāti. Kamēr tvaiks nesāk pūst, vajag izvēlēties maksimālo intensitāti, un tad jūs varat pielāgot iestatījumus saviem vajadzībām.

6. Ozona ieslēgšanas funkcija

Ieslēdziet ozona slēdzi "○", tad iedegsies ozona darbības indikators "○". Šajā laikā ieslēdzas ozona caurule, un jūs skaidri jutīsiet ozona smaržu tvaikā. Tas notiek pateicoties atomizācijas procesam.

7. Ūdens līmeņa brīdināšanas sistēma

Sistēma pārbaudīs ūdens līmeni automātiski uzsildīšanas laikā. Ja ūdens līmenis ir normāls (starp max un min atzīmi), aparāts turpina uzsildīties. Ja ūdens līmenis ir pārāk augsts vai zems (displeja parādās „E2”, kad ūdens līmenis ir pārāk augsts, un „E1”, kad ūdens līmenis ir pārāk zems), tad aparāts automātiski pārtrauc uzsildi, tomēr pulverizatora darbības indikators  vai  būs ieslēgts, bet

“WARMING/VAPOR” (sildītāja/ karsta tvaika) slēdzis  būs atslēgts, noskanēs trauksmes signāls „Dī-Dī”, un ūdens līmeņa indikators sāks mirgot. Šajā laikā visas pogas būs bloķētas, kamēr ūdens līmenis netiks atjaunots līdz normai. Tikai tad jūs varat restartēt aparātu ar WARMING/VAPOR” (sildītāja/ karsta tvaika) slēdzi, lai turpinātu darbu.

●Uzmanību:

1. Pirms aparāta ieslēgšanas, pārliecināties ka ūdens rezervuārs ir labi pieskrūvēts, ūdens līmenis ir starp augstāko un zemāko ūdens līmeņa atzīmi, un rezervuāra vāks ir cieši aizvērts.
2. Ja nepieciešams pievienot ēteriskās eļļas procedūras laikā, izdariet to tikai pēc tam kad uzlīksiet uz pausi tvaika izsmidzināšanu.
3. Ja ir nepieciešams pievienot ārstnieciskus augus smidzināšanas procedūras laikā, ir jāizslēdz smidzināšanas funkcija uz vienu minūti, un tad drīkst atvērt rezervuāra vāku. Lūdzam atvērt rezervuāra vāku tikai kad paries 1 minūte pēc smidzinātāja izslēgšanas.
4. Katru dienu pēc aromterapijas vai zāļu smidzināšanas ir jātīra kokvilnas plāksne no ēteriskam eļļām un zāļu sietiņš.
5. Pirms tvaika pulverizatora lietošanas uz klienta sejas, ir jāuzgaida kamēr izsmidzināšanās normalizējas.
6. Pulverizatora tvertnei ir jābūt 40 cm no klienta sejas un vērstai tā, lai tvaiki proporcionāli pārklātu klienta seju no zoda līdz pieri, lai izvairītos no apdegumiem ar karsto tvaiku.
7. Ozonam piemīt sterilizācijas efekts, bet tas var arī bojāt ādu, kā arī zāļu ārstnieciskas īpašības. Tāpēc ir ļoti svarīgi izvēlēties procedūras laiku, kas ir piemērots klienta ādas tipam.
8. Ir aizliegts izņemt ūdens rezervuāru uzreiz pēc tvaika pulverizatora lietošanas, jo tas var izraisīt apdegumus. Lūdzu uzgaidiet kamēr ūdens rezervuārs atdzēsīs.
9. Ir nepieciešams izvairīties no pārmērīgas ūdens pievienošanas, jo tas var ne tikai nelabvēlīgi ietekmēt uz aparāta, bet arī izrast strāvas noplūdi.
10. Ja rodas problēmas ar ūdens vai tvaika noplūdi zem aparāta vai pie rezervuāra vāka, atceraties ka ir nepieciešams vispirms atslēgt barošanas vadu, un tikai pēc tam pārbaudīt vai ūdens rezervuārs un rezervuāra vāks ir labi nostiprināti. Ja tas nerisina problēmu, lūdzam vērsties apkalpošanas servisā.
Risinājums:
11. Aparāta elektrobarošanas vadam ir jābūt kvalitatīvi zemētam.
12. Kad modelis H1104 nepārtraukti strādā un ūdens līmenis pazeminās līdz minimālai atzīmei un ūdens ne tiek pievienots, uzreiz ieslēdzas temperatūras aizsardzības sistēma un aparāts atslēdzas uz īso laiku. Šajā laikā ir nepieciešams pievienot ūdeni, pretējā gadījumā temperatūras aizsardzības sistēma. Pēc 1-3 minūtēm pēc ūdens pievienošanas, aparāts atkal uzsāk normāli strādāt.

●Uzmanību!

1. Ir aizliegts likt eļļainus materiālu ūdens rezervuārā vai zāļu tīklā; tas var radīt problēmas ar ūdens pulverizatoru.
2. Ir aizliegts vērst pulverizatora uzgali no sejas augšpusē, jo tas var izraisīt apdegumus.
3. Ir aizliegts atvērt rezervuāra vāku vai izņemt ūdens rezervuāru, kamēr strādā pulverizators.
4. Ir aizliegts pakļaut aparātu mitruma iedarbībai darbības laikā (piemēram strādāt vannas istabā).
5. Ir aizliegts strādāt ar aparātu zem tiešiem saules stariem, jo tas var izraisīt saules dūrienu.
6. Ja jums rodas kādas īpašas problēmas, lūdzam sazināties ar remonta aģentūru, lai ar aparātu nodarbotos profesionāļi, nevis patstāvīgi mēģiniet atvērt aparāta korpusu.

7. Ja elektrobarošanas vads ir bojāts, labāk izmantot rezerves daļas no ražotāja rūpnīcas. Ir aizliegts veikt ierīces remontdarbus nekvalificētām personām. Jums jāvēršas nozīmētā darbnīcā lai to salabotu.

●**Apkope**

- Tīriet sildīšanas elementus vienu reizi nedēļā (rekomendācija: ūdens rezervuāra mazgāšanai sajauciet mazliet etiķskābes vai citronskābes ar ūdeni, uzsildiet vienu minūti, pēc tam, izmantojot tīru ūdeni nomazgājiet sildīšanas cauruli.)
- Pievērsiet uzmanību ūdens daudzumam ūdens rezervuārā.
- Tīriet aparātu pēc lietošanas, lai izvairītos no kosmētisko produktu nogulsņēm.